

取扱説明書

Wellstyle ヒールプロテクター

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1.ご使用上の注意

警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者等が必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品は、ひじ、かかとの床ずれを防ぐための用具です。
用途以外の目的で使用しないでください。
- 本製品は床ずれを完全に防ぐ商品ではありません。そのため定期的に圧迫を開放してください。
この商品は効果的に圧力を分散しますが、長時間同一の姿勢を続けると床ずれの原因となります。
- 製品をご使用中の喫煙は、おやめください。
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。


注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性のあるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。
洗濯後など、十分乾燥していない状態で使用すると、カビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。
- 空気が充填された中材（エアセル）の空気が抜けていることを確認した際は、使用を中止してください。
- 面ファスナーの締め過ぎによる圧迫にご注意ください。
締め過ぎますと床ずれの原因となります。また、痛みやかぶれ、かゆみ、しびれなどの異常を感じた場合は使用を中止してください。

2.製品の特長

- 空気が充填された4本の中材（エアセル）でやさしくサポートします。
- 大きい中材（エアセル）は、ふくらはぎを支えアキレス腱を圧迫しないように配置し、使用時の不快感を軽減します。小さなエアセルは、かかとやくるぶしを浮かせて床ずれリスクを軽減します。
- ヒヤッとしない内側素材で、ご家庭で丸洗いもできるため、快適で清潔にお使いいただけます。

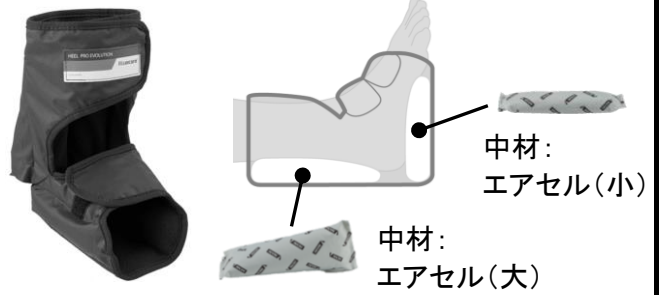

3.ご使用方法

- ① 面ファスナーをはがしネームタグがついている側から足を挿入します。
- ② 締めすぎないように面ファスナーを留めて固定します。

△注意 痛み・かぶれ・かゆみ・しびれなどの異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。



足裏面にはすべり止め付き

装着したまま立位・座位動作が可能です。外さずにそのまま車いすに座ったり、立位をとることができます。

足裏面
すべり止め



4.お手入れの方法

- 洗濯（水温60度まで）できます。手洗いモードやソフトモードなど、やさしく洗えるモードのご使用をおすすめします。中材のエアセルを入れたまま洗濯できます。
- 洗濯後は十分に乾かしてください。十分乾燥していない状態で使用すると、カビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。

- △注意**
- ドライクリーニング、乾燥機、アイロンなどは使用しないでください。
 - 漂白剤を使用しないでください。
 - 先のとがったものと一緒に洗わないでください。

5.仕様

製品名	Wellstyle ヒールプロテクター	
種類	S	M
サイズ（上部筒内周囲）	36cm	44cm
重量	約82g	約93g
材質	表地：ナイロン / 中材：エアセル	

■製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのコトハ

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

● アフターサービスのお問い合わせ

取扱店